

プロフィンPDXハンドピース

小さな動きで大きな仕事

ストローク幅

スタンダード: 1.2mm

マイクロ: 0.3mm


NEW

スリムネック

- 微細振動により、回転切削器具を用いた治療で発生する隅角部の仕上げ（微細な角の平滑化）に効果的です。
- オールセラミックやCAD/CAMのための支台歯形成の緻密な仕上げにも有効です。
- スタンダードタイプは矯正治療時のディスクングに最適です。



- 大臼歯へのアクセスが容易です。
- ヘッドが小さく、スリムネックのためマイクロスコープでの治療においても術野を十分に確保します。

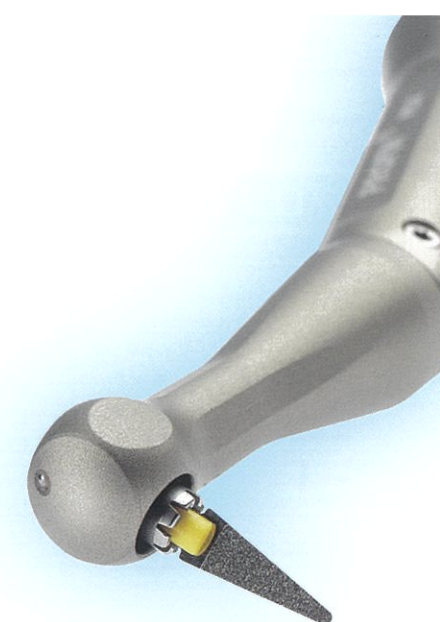

プロフィンPDHハンドインスツルメント

NEW

プロフィンシステム専用のハンドインスツルメントです。プロフィンチップを装着して使用します。電動式では対応できない微細な仕上げに活用ください。




2つの機能により歯の輪郭に沿って自由に角度の変更可能

- 固定式** 360°任意の位置にロックし、一定の方向に往復運動させて使用します。
- 自在式** ロックを外すと360°自在に、歯の外形に沿ってセルフステアリングで往復運動します。


※レジン充填直後に使用する場合、必要に応じてシリンジ等で冷却しながら使用してください。

回転式インスツルメントに不向きな症例にも有用です。

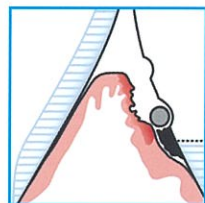

回転式器具による隣接面や歯根面の平滑仕上げ、或いは充填材のオーバーハングの除去は不可能です。また、周囲の組織を損傷する危険があります。

むずかしい隣接面や歯根面においてとくに有用性があります。

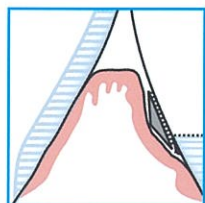

往復運動型プロフィンPDXハンドピースに装着したフラットな形状のチップはその運動によって能率的に隣接面や歯根面を仕上げ研磨することができます。また、充填材、或いは合着材のオーバーハングを除去します。プロフィンチップ片面のみにダイヤモンドまたはタングステンがコーティングされていますから、周囲の組織を損傷することなく安全に操作できます。複雑な形態の歯牙においても修復物のカントゥアを精緻に形成できます。

プロフィンチップIPR

NEW



歯科矯正時のディスクング用チップです。チップの刃部が広く、均一かつ効率的にエナメル質を削ることができます。プロフィンPDXハンドピースを用いることで、より安全により効果的にディスクングを行うことができ、チェアタイムの短縮に繋がります。



プロフィンチップIPR

矯正用チップ

型番	カラー	厚み	形状	粒子
LTA-P1	黒	0.1mm	両面	15μ
LTA-P2	白	0.2mm	両面	40μ
LTA-P25R	紫	0.25mm	片面(下向き装着時右側)	50μ
LTA-P25L	紫	0.25mm	片面(下向き装着時左側)	50μ
LTA-P3	黄	0.3mm	両面	50μ
LTA-P4	緑	0.4mm	両面	50μ
LTA-P5	赤	0.5mm	両面	50μ

セット販売があります。