

優れた形状記憶性を有する NiTi ファイル

HyFlex™ CM / EDM / OGSF

HyFlex™ 専用 Facebook ページ




従来の NiTi ファイルは曲げ強度に弱くスプリングバックする為、トランスポーターションやレッジなどの問題が発生することがありました。HyFlex™ CM / EDM / OGSF は、CM Wire で作られ、室温でオーステナイト（鉄のγ鉄に炭素や合金元素などの他の元素が固溶したもの）からマルテンサイトへ、結晶構造を変化させたユニークな技術をもった NiTi ファイルです。それにより高い柔軟性と強度な破折抵抗を併せ持つことに成功しました。

優れた根管追従性

超弾性がない為、ファイルがスプリングバックせず、本来の根管の解剖学的構造に沿って拡大形成が可能です。その為トランスポーターションやレッジを軽減できます。

プレカーブの付与

レッジのある再根管治療にも応用が可能。

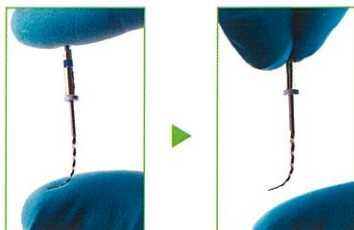

交換時期がわかりやすい

オートクレーブ滅菌により、本来の形状と強度を取り戻すことができます。（※Sapienza University 2011）形状回復する限り何度でも使用可能（※薬事認証あり）となります。また「形状回復しない＝ファイルの交換時期」となるので交換時期が一目で確認できます。

▼ 使用前



▼ 使用後




▼ オートクレーブ滅菌後（熱処理後）



※使用後、金属疲労が目視で確認できない場合でも必ずオートクレーブ滅菌をしてください。

HyFlex™ EDM 症例


阿部修先生、平和歯科医院

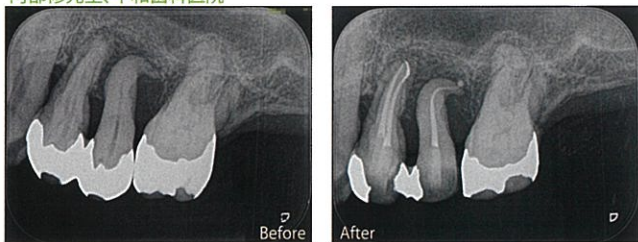

坂東信先生、坂東歯科医院



齋藤善広先生、くにみ野さいとう歯科医院

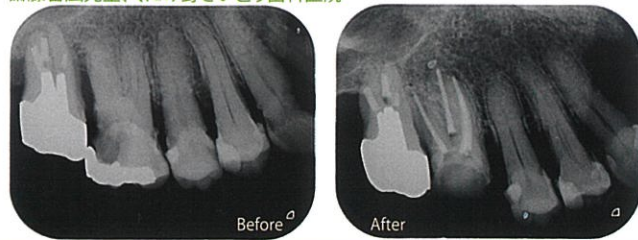

HyFlex™ EDM



放電加工による独自のファイル形状

Coltène 独自の製造工程「放電加工」中に出る火花が素材の表面を溶かし、且蒸発させます。これにより HyFlex EDM の特徴である荒い表面を生み出し、ファイル先端に向かって切削断面を変化させた独特のファイル形状を可能にしました。放電加工で高めた切削効率・破折抵抗と CM Wire の柔軟性のコンビネーションが根管治療に必要とされるファイルの数を減少させます。

HyFlex EDM 特徴




滅菌済み
再使用可能
保険適用




高い破折抵抗性

放電加工による回転疲労抵抗性の向上によってより安全な治療をご提供いたします

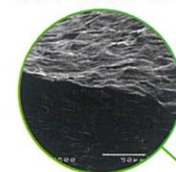

優れた切削力

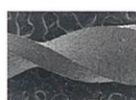

可変
クロスセクション

切削片の排出と破折抵抗性に優れています



Source : Dr. Chiara Pirani & Dr. Francesco Iacono, University of Bologna

穿通・根管拡大形成電動式（ロータリー）ファイル


ハイフレックス OGSF

HyFlex™ EDM

対応症例：彎曲根管・直線根管

使用テクニック：シングルレングス 梱包方法：滅菌パッケージ

操作方法：ライトペッキングモーション

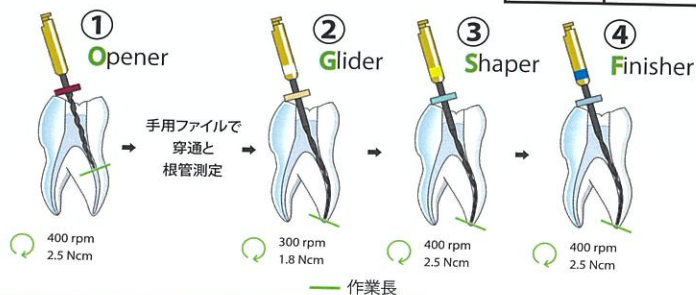

拡大形成の治療過程を簡易化する事で、歯内療法における習熟度のラーニングカーブを短縮！
HyFlex EDM - OGSFシーケンスで、インシャルトリートメントをより安心かつスムーズに！

HyFlex EDM OGSF シークエンス 4本入り			21 mm	25 mm	
OGSF Sequence			60036141	60036142	
HyFlex EDM OGSF リフィル3本入り			18 mm	21 mm	25 mm
Orifice Opener	18/.11	60036140	-	-	
Glidepath File	15/.03	-	60023493	60023492	
Shaping File	18/.045	-	60036136	60036137	
Finishing File	30/.04	-	60036138	60036139	



Opener



Glider



Shaper



Finisher




HyFlex EDM - OGSFの
ファイルサイズと
テーパークセプト
アニメーション

ハイフレックス EDM

HyFlex™ EDM

対応症例：彎曲根管・再根管治療・直線根管

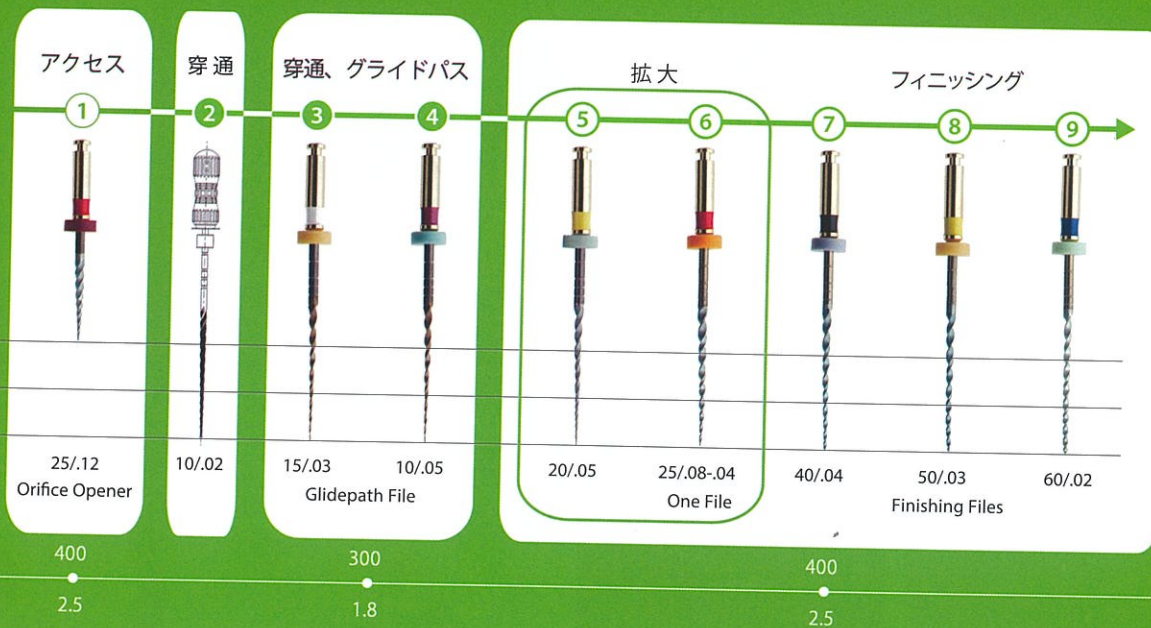

アクセス

1 25/.12 ストレートラインアクセスの形成

穿通

2 10/.02 ※お手持ちのハンドファイルをご使用ください。

3 15/.03 Glidepath File : 作業長までのグライドパス（誘導路）を形成

4 10/.05 Glidepath File : 症例に応じて更なるグライドパス（誘導路）形成が必要な場合に使用

拡大

5 20/.05 Preparation File : 湾曲部へのアクセス時にOne File が入りにくい場合に使用

6 25/.08-.04 One File : 作業長まで根管拡大形成

フィニッシング

7 40/.04

8 50/.03 Finishing Files : 症例に応じて更なる根管形成が必要な場合、もしくは再治療時に使用

9 60/.02

HyFlex EDM NiTi File アソート

内容 / サイズ		21mm	25mm	包装:3 本
Shaping Set Simple	10/.05; 25/.08-.04; 25/.12 15mm	60022267	60019363	① ④ ⑥
Shaping Set Medium	10/.05; 20/.05; 25/.08-.04	60022277	60022278	④ ⑤ ⑥
Shaping Set Max Curve	15/.03; 10/.05; 20/.05	60023494	60023495	③ ④ ⑤
Finishing Set	40/.04; 50/.03; 60/.02	60022268	60019364	⑦ ⑧ ⑨

HyFlex EDM NiTi File

内容 / サイズ		15mm	21mm	25mm	包装:3 本
■ 25/.12	Orifice Opener	60019596			①
□ 15/.03	Glide Path File		60023493	60023492	③
■ 10/.05	Glidepath File		60022269	60019594	④
■ 20/.05	Preparation File		60022275	60022276	⑤
■ 25/.08-.04	One File		60022270	60019595	⑥
■ 40/.04	Finishing File		60022271	60019597	⑦
■ 50/.03	Finishing File		60022272	60019598	⑧
■ 60/.02	Finishing File		60022274	60019599	⑨

販売名: NiTi ロータリーファイル HyFlex 滅菌パッケージ 認証番号: 228A0BZ100013Z00