

タイニロイワイヤー（歯列矯正用NiTiワイヤー）

# Nano White


ナノホワイト

**はがれにくい特殊コーティング技術を採用**

ナノ\*粒子を使った新しいコーティング技術により、はがれにくく美しさが続きます

\*1nm（ナノメートル）=100万分の1mm

## 塗膜耐久性試験結果

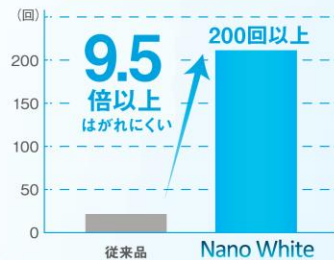


### 試験方法

.016ワイヤーに1ポンド(454g)の力をかけ、歯磨き粉をのせたガラスの上で傷が目視されるまで測定（自社試験）

## ナノホワイトがはがれにくい理由

ナノ粒子が金属の凸凹に隙間なく密着、高い耐剥離性を実現

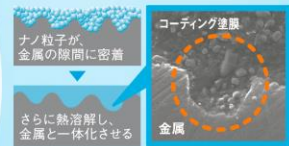

電顕写真 ×20,000

ガラスの透明性を持つ装置の併用でさらに目立ちにくく



クリスタシリーズ（矯正用ブラケット+結紮装置）

**CrystaBrace** / **CrystaSnap**  
クリスタブレース / クリスタスナップ

ホワイトコーティングワイヤー  
**Nano White**  
ナノホワイト

管理医療機器（クラスII）歯列矯正用ワイヤー  
医療機器認証番号：16300BZZ01773000

For better dentistry

**DENTSPLY**  
SANKIN

デンツプライ三金株式会社

東京本社 〒106-0041 東京都港区麻布台1-8-10  
www.dentsply-sankin.com