



だいちゃんシリーズ

貼付式模型台

「作業時間短縮」が実現する「コスト削減性能」


作業時間が短いため生産性の向上が見込めます。

また、労働時間が少なくなることで労務費の大幅ダウンも見込めます。

作業効率を上げながらコストを削減する「攻めのコストダウン」を可能にします。



作業時間 短縮	工数コスト 削減	石膏廃材 削減
------------	-------------	------------

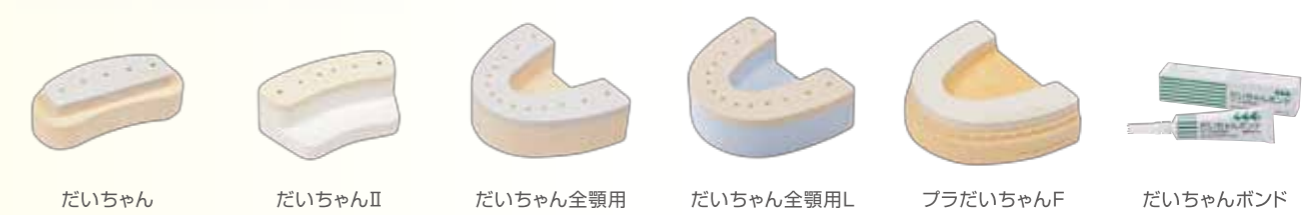

SSS サンエス石膏株式会社

大阪本社 | 〒564-0063 吹田市江坂町1-23-101 大同生命江坂ビル13F
TEL(06)6339-0870(代) FAX(06)6339-0871

デンタル事業部
東京オフィス | 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-6 福利久ビル5F
TEL(03)5283-6201(代) FAX(03)5283-6205

大阪オフィス | 〒564-0063 吹田市江坂町1-23-101 大同生命江坂ビル13F
TEL(06)6339-0870(代) FAX(06)6339-0871

福岡オフィス | 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-4-17 第6岡部ビル6F
TEL(092)413-5220(代) FAX(092)413-5222

URL : <http://www.san-esugypsum.co.jp>
E-mail : headquarter@san-esugypsum.co.jp

サンエス石膏

お問い合わせ・商品のお求めは下記へ

販売元:サンエス石膏株式会社

高性能が可能にする作業時間の短縮。 「時間の短縮=コスト削減」を実現。



特長


カンタン作業と精密性能を両立

- 1 ピンを立てる必要がありません。
- 2 維持溝を開ける必要がありません。
- 3 石膏の硬化膨張の影響を受けないので、精密な模型が製作できます。
- 4 作業時間が大幅に短縮します。
- 5 作業時に石膏を使用しないので、産業廃棄物が少なくなります。
- 6 石膏を練る必要がありません。

だいちゃんII
ダウエルピンを1本増やした事により、適応症例が幅広くになりました。

だいちゃん全顎用L
プレートを広くすることで適応症例が増えました。また、両面カットピンを使用することで技工工程のセパレート作業時にピン肩部の接触のリスクが低減し、且つ、回転防止の効果を向上させました。

工程の比較 (全顎模型の場合)

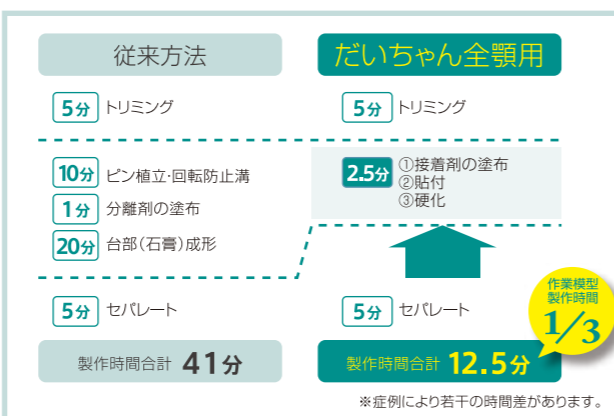

包装


- だいちゃん 1ケース 50個入り(石膏プレート+石膏基台)
- だいちゃんII 1ケース 50個入り(石膏プレート+石膏基台)
- だいちゃん全顎用 1ケース 30個入り(石膏プレート+石膏基台)
- だいちゃん全顎用L 1ケース 30個入り(石膏プレート+石膏基台)

使用方法

毎日、補綴物の納期に追われている技工士さんにとって、時間を短縮できれば、どれだけのメリットがあるでしょうか？
だいちゃんシリーズ(例)を使用すれば、模型製作の時間を大幅に短縮することができます。



新しいスタイルの貼付式模型 ダウエルピンを使わないからセプレート位置、自由自在!

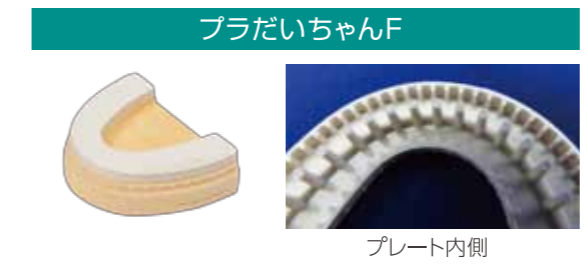


特長

ダウエルピンを使用しない独自の維持方式を採用し、何処からも切ることができる新しい発想の貼付式模型台です。プレートに熱変形を極力少なくした特殊樹脂を使用しています。

包装

- プラだいちゃんF 1ケース 30個入り(樹脂プレート+石膏基台)

使用方法

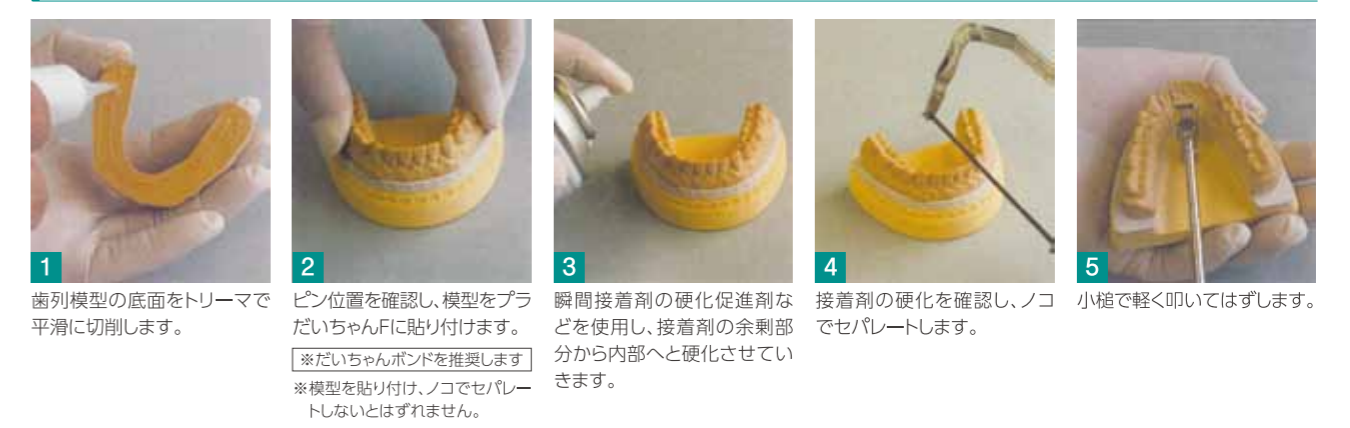

だいちゃんシリーズ専用の高性能瞬間接着剤

だいちゃんボンド



特長

新しいスタイルの貼付式模型台「だいちゃん」シリーズ専用のゼリー状・瞬間接着剤です。強固な接着力と硬化時間に余裕があるため、作業がしやすくなります。また、たれにくく流れないため、垂直面でも使用できます。

包装

- だいちゃんボンド 20g×10本入り

ご注意 ※スチーマー等で「だいちゃん」シリーズを洗浄する際は、スチームノズルを3cm以上離して下さい。特に、ピン穴にスチームノズルを密着しての洗浄はしないで下さい。