

DIRECTA ProphyCare



Made in Sweden

CrossField ▶ www.crossf.com



右記の二次元コードよりアクセスしてください。

予防歯科先進国スウェーデン発世界50か国以上で使用されている
PMTCPペーストのロングセラー「プロフィーペーストPro」シリーズ

プロフィーペースト Pro パラベンフリーにリニューアル

ブルー / グリーン / レッド / イエロー

4種のRDAで歯面の状態に合わせてプロフェッショナルな使い分けが可能

0%
Paraben




● ブルー (94g/60ml)
RDA:250 / 粒度:125μm
着色除去
研磨材:軽石

● グリーン (97g/60ml)
RDA:170 / 粒度:70μm
一次研磨・汚れ除去
研磨材:軽石

● レッド (82g/60ml)
RDA:120 / 粒度:20μm
二次研磨
研磨材:シリカ

● イエロー (84g/60ml)
RDA:40 / 粒度:2μm
つや出し
研磨材:シリカ

- パラベンフリータイプ
- 1,000ppm フッ化物含有
- 4種のRDAで歯面の状態に合わせて選択可能
- のびが良く、飛散しにくい
 - ・ 中性のpH値 (5 ~ 6pH)
 - ・ 爽やかなミント味
- 便利なラミネートチューブ

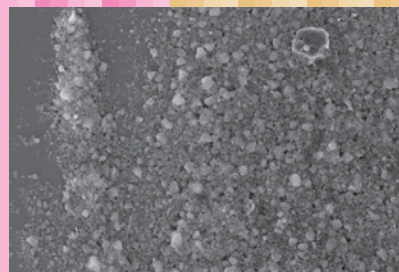

SEM画像(観察倍率:2,000倍/イエローRDA40) 粒子が細かく均一

商品名 プロフィーペースト Pro パラベンフリー (ブルー、グリーン、レッド、イエロー)

- チューブタイプ (60ml) (ブルー、グリーン、レッド、イエロー)
各1本 標準価格 4,400円 (税込4,840円)

販売名: プロフィーペースト Pro 医療機器届出番号 13B1X00133000027



従来のプロフィーペースト Pro
ブルー / グリーン / レッド / イエローは
在庫限りで販売終了となります

ProphyCare

Clean and polish

プロフィーペースト Pro パープル

1本でスケーリング後の一次、二次研磨・汚れ除去・つや出しまで可能

- 1,000ppm フッ化物含有
- RDA 197-50 ワンステップでケアタイムの短縮
 - ・ミント味
- 研磨材：シリカ



パープル

● チューブタイプ

● カップタイプ



衛生面を重視した単回包装
・訪問歯科に
・院内感染対策に



グローブ等に固定できる
粘着テープ付



● パープル (84g/60ml)
RDA:197-50 / 粒度:100-7μm
研磨材：シリカ

商品名 プロフィーペースト Pro パープル

● チューブタイプ (60ml)

1本 標準価格 5,900円 (税込6,490円)

● 単回使用 2g カップタイプ

144個/箱 標準価格 28,000円 (税込30,800円)

販売名：プロフィーペースト Pro 医療機器届出番号 13B1X00133000027

ProphyCare HAp

ハップ

プロフィーペースト Pro HAp

- ナノ粒子ハイドロキシアパタイト含有
PMTC 後もなめらかでツヤのある歯を保ちます
- パラベンフリー
- RDA 197-50 ワンステップでケアタイムの短縮
 - ・1本でスケーリング後の一次、二次研磨・汚れ除去・つや出しまで可能
 - ・忙しい診療時に便利 ・中性の pH 値 (5~6 pH)
 - ・ミント味
- フッ化物無配合
- 研磨材：シリカ
 - ・粒度：100-7μm



ハップ

商品名 プロフィーペースト Pro HAp

● チューブタイプ (60g)

1本 標準価格 5,900円 (税込6,490円)

販売名：プロフィーペースト Pro 医療機器届出番号 13B1X00133000027

適用例	ブルー (RDA 250)	グリーン (RDA 170)	レッド (RDA 120)	イエロー (RDA 40)	パープル (RDA 197-50)	HAp (RDA 197-50)
強固な着色除去	●					
厚いプラーク除去	●	●				
一次研磨	●	●			●	●
着色除去		●			●	●
充填物の研磨			●		●	●
軽度の着色除去			●		●	●
薄いプラーク除去			●		●	●
根面の研磨			●		●	●
エアーポリッシング後				●	●	●
最終研磨 / つや出し			●	●	●	●
インプラント			●	●	●	●
小児				●	●	●
摩耗した歯面				●	●	●

商品の内容・価格・仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。無断転載禁止。
ご使用の際は、添付文書をよくお読みください。



販売元: クロスフィールド株式会社

〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6 TEL 03-5625-3306 FAX 03-3635-1060
URL: <https://www.crossf.com> E-mail: cf@yoshida-net.co.jp

製造販売元: 株式会社吉田製作所

お問い合わせは