

根管充填のパラダイムシフト ツーンワン根管充填システムが実現

- ◎ 優れた生体親和性
- ◎ 微膨張(0.1%)による高い根管封鎖性と再感染リスクの低減
- ◎ 優れた流動性

- ◎ 湿潤下でも硬化
- ◎ ガッタパーチャポイントと象牙質への密着

- ◎ ポストプレパレーション可能
- ◎ 溶解度0.0%による寸法安定性
- ◎ X線造形性
- ◎ 再根管治療可能


手間がない操作と保管 3D根管充填



操作時間
10-15分
硬化時間
25-30分




保管方法
常温 (18°C-24°C)

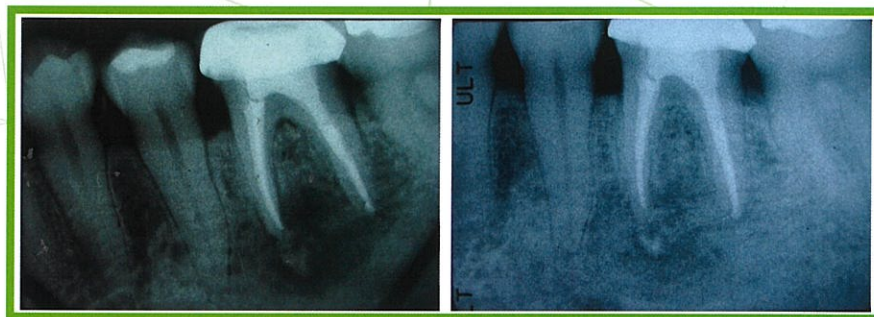

After-Op 2週間
GF2 + ガッタパーチャポイント #40.06

After-Op 9か月
出典: Dr. Ricardo Caicedo, University of Louisville

側枝の細部まで行き渡る優れた流動性:
GuttaFlow 2 はチキソトロピー性があるため、加圧下で粘度が減少しフローが増し、側枝をはじめとする根管細部まで充填されます。

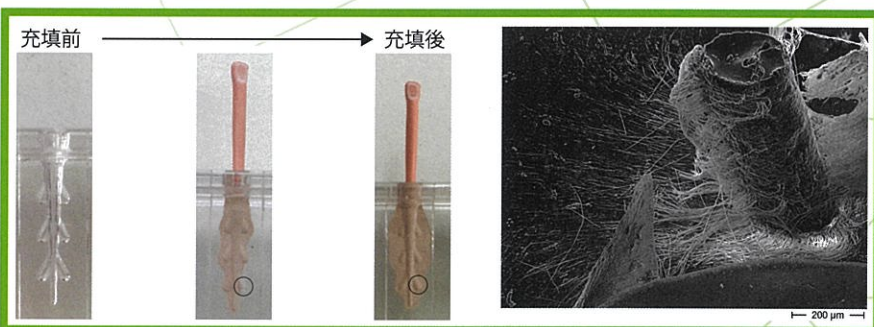

● 封鎖性を高める微膨張 $>>> 0.1\%$
GuttaFlow 2 は微膨張により高い封鎖性を可能にし、ガッタパーチャポイントと象牙質に対して優れた密着性を実現します。

● GuttaFlow 2 の溶解度は0.0%*
これにより、根管壁との間にバクテリアが繁殖するスペースをつくることなく、寸法的に安定した不浸透性の高い根管充填をもたらします。

* ISO 6876:2001に準拠
出典: NIOM Nordic Institute for Dental Material Testing



ガッタフロー-2

スタンダードセット	60013701
シリンジ (5ml)	1本
ミキシングチップ (19ga)	12個
ミキシングパッド	1冊
リフィルシリンジ (5ml) 1本	60013745
リフィルミキシングチップ (19ga) 24個	60013719